

Equipo de Infusión Macrogotero en Y


GROSSMED

Fácil Visualización del Contenido

Cámara transparente y tubo de infusión, flexible y resistente de 1,50 m de longitud.

Dosificación Controlada

Cuenta con mecanismo regulador de flujo y sitio de inyección en "Y". Garantiza 20 gotas por 1 mL de solución.

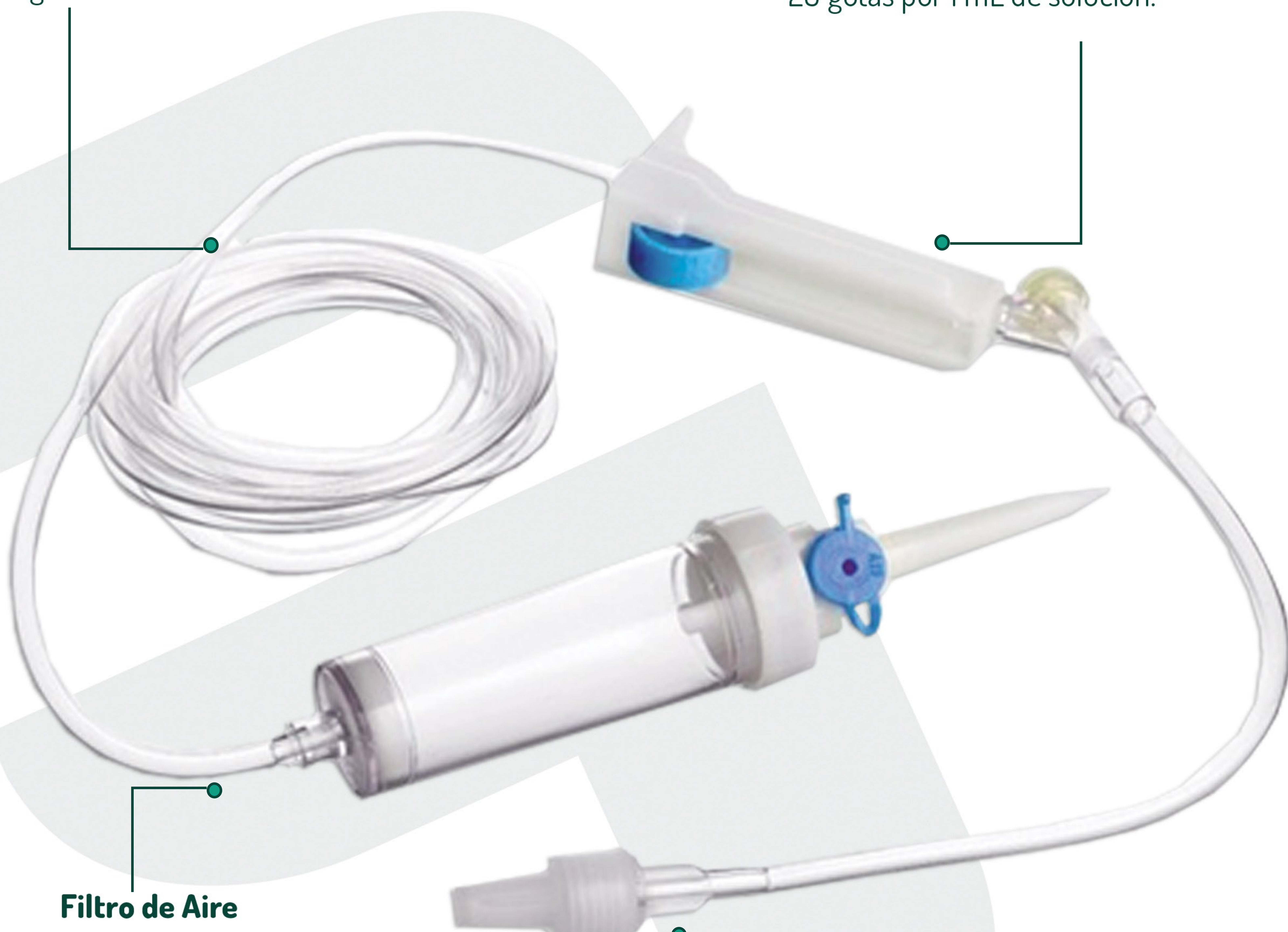

Filtro de Aire

Previene que el aire reduzca en un 5% el paso de la solución administrada a través de la cámara de goteo.

Adaptador Universal

De tipo Luer Slip que se acopla perfectamente con el sistema de venopunción.



Suministro	Código	Presentación
20 Gotas x mL	GM030120	Paquete x 25 Empaques individuales. Bulto x 400 Unds (16 Paquetes).

Equipo de Infusión Macrogotero en Y

GROSSMED

Dispositivo médico desechable indicado para la administración endovenosa de soluciones líquidas estériles. Se utiliza en fluidoterapia intravenosa para suministrar cantidades medidas de soluciones (líquido + fármaco), a velocidades de flujo específicas, basándose en el tamaño de las gotas de la solución.

El tamaño de las gotas es controlado por el diámetro fijo del tubo plástico del sistema. Garantiza 20 gotas por 1 mL de solución.

Componentes y Material

- ✓ Cámara de goteo transparente y flexible de policloruro de vinilo (PVC) de grado médico. Impide la entrada de cualquier burbuja al sistema.
- ✓ Tubo de infusión de PVC, flexible y resistente, con 1,50 m de longitud aproximadamente. La transparencia de la manguera permite que sea visualizado el paso de la solución (líquidos, medicamentos, sangre o plasma) o el retorno venoso.

Diseño

- ✓ Cuenta con un mecanismo regulador de flujo y 2 puertos de administración de infusión paralela. Posee adaptador universal Luer Lock que se ensambla perfectamente con el sistema de venopunción.
- ✓ El filtro de aire evita que este reduzca en un 5% el paso de la solución administrada a través de la cámara de goteo.

Esterilización y Vida Útil

- ✓ Paquete individual esterilizado con gas de Óxido de Etileno (EO). No tóxica. Libre de látex y pirógenos. Duración de 5 años garantizada.

Certificación

- ✓ Cumple y excede requerimientos de calidad de la norma internacional ISO 13485:2016, ISO 8536-4:2010 y MDD 93/42/EEC.



Suministro	Código	Presentación
20 Gotas x mL	GM030120	Paquete x 25 Empaques individuales. Bulto x 400 Unds (16 Paquetes).